

2022 年 11 月（初版）

類別：機械器具（74）

指定管理医療機器 一般的名称：多相電動式造影剤注入装置（JMDN コード：40723000）

特定保守管理医療機器／設置管理医療機器

販売名：MICA30 インジェクター


【禁忌・禁止】

- ・適応外のシリンジ・チューブを使用しないこと
- ・造影剤アレルギーのある患者には使用しないこと
- ・注入開始前にチューブ内に空気がないことを確認しなければならない
- ・チューブ内に空気が入った状態で注入を開始しないこと。

【形状・構造】

本システムは、下記の構成品よりなる。

- (1) コンソール
- (2) IV ポール
- (3) ベットサイドディスプレイ
- (4) インジェクタヘッド
- (5) ホース気泡センサ
- (6) チューブ気泡センサ
- (7) エクステンションアーム
- (8) 固定支持具
- (9) キャリーエイジ
- (10) バリアブルスイッチ
- (11) 電源ボックス
- (12) 延長ケーブル
- (13) 電源ケーブル
- (14) ハンドスイッチ
- (15) フットスイッチ

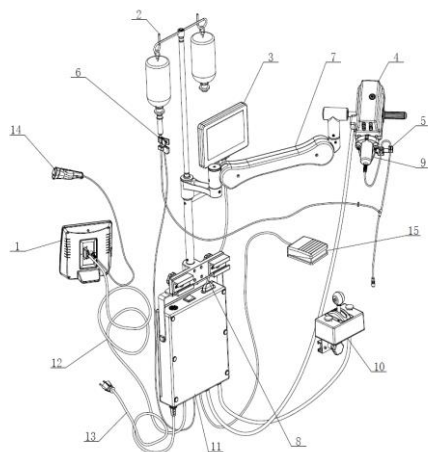

【各部の名称及び機能】

番号	名称	機能
1	コンソール	装置の操作を行う
2	IV ポール	造影剤を保持する
3	ベットサイドディスプレイ	設定値や造影剤残量を表示する
4	インジェクタヘッド	造影剤を注入する
5	ホース気泡センサ	気泡を検知する

6	チューブ気泡センサ	気泡を検知する
7	エクステンションアーム	インジェクタヘッドの位置を延長させる
8	固定支持具	インジェクタヘッド及びエクステンションアームを固定
9	キャリーエイジ	シリンジを動かす機能
10	バリアブルスイッチ	造影剤の注入速度を変更する
11	電源ボックス	装置の電源を供給する
12	延長ケーブル (ディスプレイケーブル)	1 番のコンソールと 11 番の電源ボックスを接続する延長ケーブル
13	電源ケーブル	電源を供給するケーブル
14	ハンドスイッチ	注入開始ボタン（接続先：11 番電源ボックス）
15	フットスイッチ	テストモードの際の注入開始ボタン（接続先：11 番電源ボックス）

【動作原理】

注入パラメータを設定し、注入スタート信号がコンソールに送られると、本装置のインジェクタヘッドが稼働し、患者に造影剤が注入される。

インジェクタヘッド内のアクチュエータはモータ制御システムで構成されている。インジェクタヘッドは、コンソールの制御下で、設定された注入プログラムに従って注入され、キー操作を通じて造影剤を注入する。

注入量設定範囲：

標準モードでは 0.05mL～30mL が設定でき、増分は 0.05mL の積分倍率

バリアブルモードは 1mL～10mL に設定でき、増分は 0.05mL の積分倍率

トライアルモードは 1mL～3.0mL に設定でき、増分は 0.05mL の積分倍率

【機能】

・注入量：0.05mL～30mL

・注入速度設定範囲：

標準モードまたはバリアブルモードは 0.05mL/s ～ 5mL/s で、増分は 0.05mL/s

テストショットモード：1mL/s ～ 3mL/s、増分は 0.05mL/s

・制限注入圧力：500 psi (50 ～ 500 psi (50psi 増分) 以内に設定可能)

【電気的規格及び分類】

・電気的定格：AC100 ～ 240V、50 ～ 60Hz、250VA

・電撃に対する保護の形式 クラス I

・電撃に対する保護の形式 CF 形装着部

【使用目的又は効果】

本品は、血管造影のための診断用造影剤の注入に用いられる

本品には取扱説明書がありますので、必ず確認してください。

【使用方法等】

1. 組み合わせて使用する医療機器
MICA30 血管造影用シリンジ
(届出番号：11B1X10022000010)
MICA30 造影用耐圧チューブ
(認証番号：304ADBZX00072000)

2. 使用方法

使用期限・滅菌パックの破損やキットの欠損、異物混入の有無等を確認し開封、無菌状態にて再度キットの欠損を確認しセットアップを行う。インジェクター/シリンジ・チューブとの接続を確実にし、接続の状況を確認する。

造影剤の漏れが無い事、設定した値で造影剤が注入されている事を確認しながら使用する。異常があった場合、その使用を即時中止する。

感染性廃棄物として処分する事。

異常があった場合は感染防止策を講じたうえで製造業者へ返却、異常の原因を究明する策を講じる。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

警告:携帯型および携帯型 RF 通信機器が本品の動作に干渉する可能性があります。携帯用 RF 通信機器は、製造業者が指定するワイヤーを含め、本品のどの部分にも 30cm (12 インチ) 以内で使用しないこと。本器の性能劣化の原因となります。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法 :
水濡れに注意し、直射日光・高温多湿を避け室温にて保管のこと。
2. 有効期間 :
8年 (自己認証)

【製造販売業者及び製造業者】

製造販売業者
株式会社コスミックエムイー
埼玉県川口市芝下二丁目 31 番 3 号
電話：048-268-9811

製造業者
中国：APOSTAR Medical (上海)

本品には取扱説明書がありますので、必ず確認してください。